


FREEDOM60[®]

Syringe Infusion System

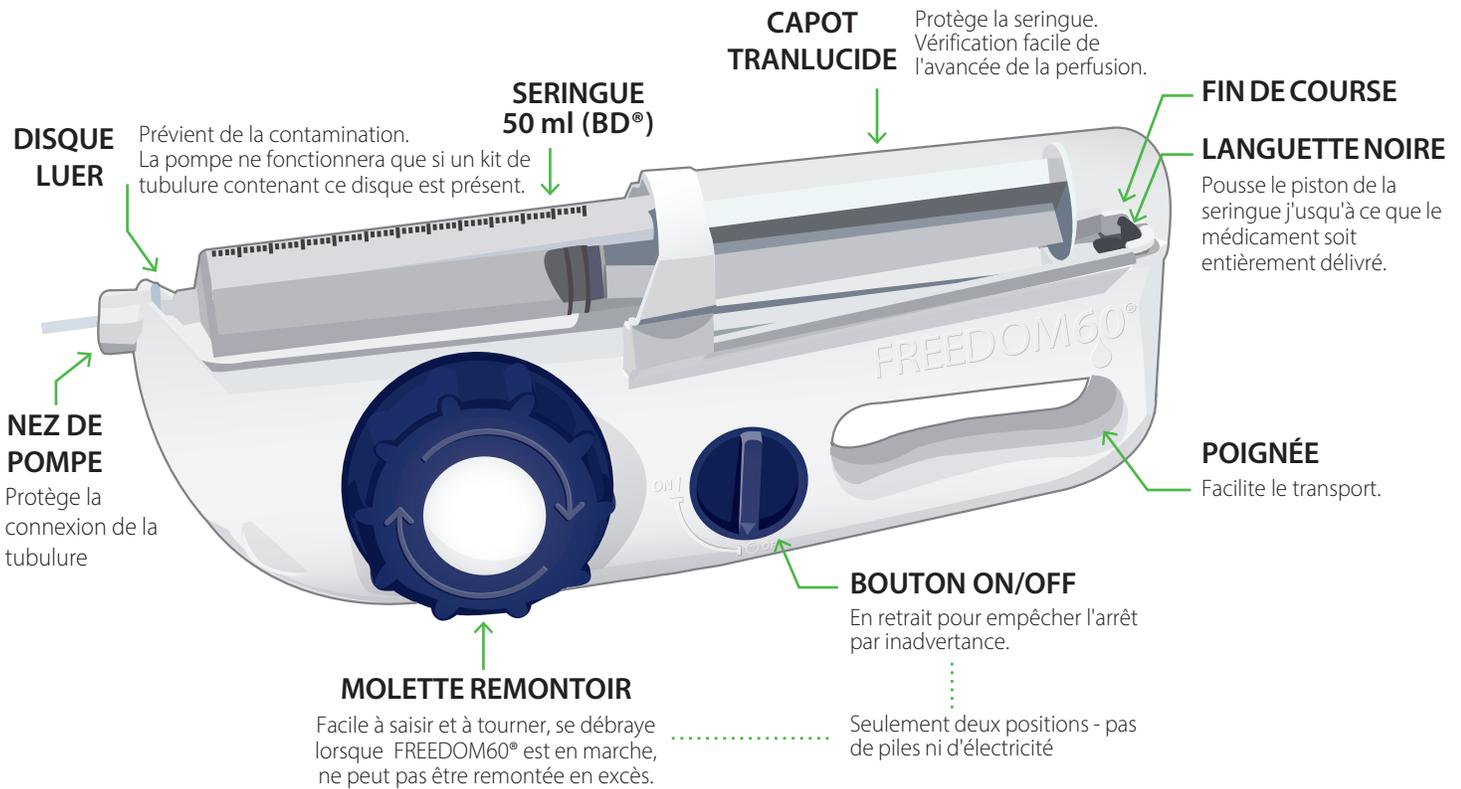


Indications :

Le système de perfusion avec seringue FREEDOM60[®] est indiqué pour la perfusion de solutions médicamenteuses

Des perfusions aussi faciles que 1, 2, 3...

1 Remonter

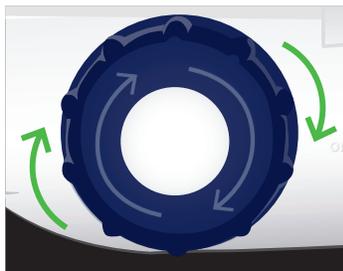


Remonter la molette jusqu'à ce que la languette noire soit en fin de course.

2 Charger



Charger la seringue remplie.

3 Perfuser

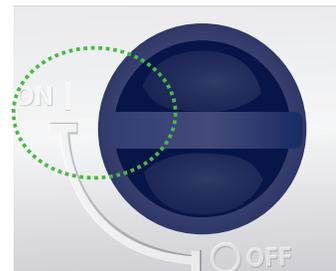

Mette sur ON et en route !

FREEDOM60[®]

Syringe Infusion System

Facile à utiliser :

- Seulement deux boutons :
 - Large molette remontoir ergonomique facile à saisir et à tourner
 - Bouton ON/OFF encastré et protégé
- Juste 3 étapes – remonter, charger et perfuser
- Entièrement portable :
 - Pas de piles ni d'électricité nécessaire
 - Sacoche de voyage incluse pour un transport facile
- Pas d'alarme ni de maintenance

Totale sécurité :

- Maintien une pression de sécurité constante
- Seul les systèmes KORU Freedom possèdent le DynEQ™ (Équilibre Dynamique) permettant :
 - Une réponse automatique à l'augmentation de la pression (saturation des tissus) en ralentissant le débit de perfusion
- Le maintien de la pression une fois la perfusion terminée pour empêcher le retour sanguin ou celui du médicament
- Élimine :
 - Les problèmes liés au bolus
 - les débordements
 - Les surdosages ou perfusion incontrôlée

Qualité & conception robuste :

- Fabriqué aux États-Unis avec le plus haut niveau de contrôle qualité pour un produit sans défaut
- Conception robuste avec boîtier en plastique ABS moulé
- Aucune pièce électrique sensible
- Système fiable

Polyvalent :

- Utilisable pour différents types d'administrations
- Set de tubulures de précision de F0.5 à F2400

Informations

Description produit :

Pousse seringue FREEDOM60[®] avec pochette de transport (noire)
Pochette de transport de remplacement - noire
Pochette de transport motif zébré

Ref :

F10050

F10090

F10080



Spécifications techniques

Pousse seringue :

Poids : 0,4 kg
Long : 304 mm
Larg : 114 mm
Haut : 41 mm

Système :

Précision : +/- 15%
Volume résiduel : <0,4 ml

Seringue :

Volume du réservoir : 50 ml (seringues 50 ml BD[®])



Autres produits :



Pousse seringue FreedomEdge[®]

Pour les petits volumes à perfuser, seringues de 20 ou 30 ml



Sets d'aiguilles sous-cutanées sécurisées (High-Flo Subcutaneous Safety Needle Set[™]) disponibles en 24 G et 26 G, 4 mm à 14 mm de longueur, et jeu de 1 à 6 sites



Tubulure de précision (Precision Flow Rate Tubing[™]) pour les débits F0,5 à F2400



Extension de tubulure 60 cm (FEXT) Pour ceux qui ont besoin de plus de longueur