



DIFFUSEUR PORTABLE DE CHIMIOTHÉRAPIE AMBULATOIRE SÉCURISÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

SMARTeZ[®] RS Chimio rassemble aujourd'hui les dernières évolutions technologiques. Avec ses diffuseurs spécifiques, **IMM** offre aux professionnels de santé et aux patients des cures de chimiothérapie parfaitement sécurisées, sans compromis sur la précision du débit de perfusion et le confort d'utilisation.



2 rue Marcel Paul 90000 BELFORT
Tél 03 84 27 25 22
Fax 03 84 27 25 23
contact@immfrance.fr

www.immfrance.fr



- **Coque rigide anti-UV**, protection des molécules photosensibles
- **Graduations - indicateur** de suivi de la perfusion facile à lire



- **Bouchon de purge terminal**, finalise automatiquement la purge et supprime les risques d'écoulement des cytotoxiques



- **Tubulure thermoplastique polyuréthane (TPU)**, sans risque de plicatures des tubulures à l'origine de débits ralentis (clamps laissés fermés trop longtemps sur les tubulures PVC)
- **Clamp de sécurité** ergonomique, facilité de mise en œuvre



- **ChemoSafe[®] connecteur Luer Lock mâle clos**, permet une connexion/déconnexion sans risque de contact avec les cytotoxiques jusqu'au débranchement à domicile par l'infirmière libérale



- **Port de remplissage en ligne**, permet le contrôle analytique (avec le dispositif ProSeal[™])
- **Bouchon protecteur** avec code couleur, sécurité de la préparation



- **Filtre à air et à particules 1,2 µm**, supprime toute bulle d'air en provenance du réservoir du diffuseur portable

Conforme


- **SMARTeZ[®] RS chimio** est fabriqué selon la norme ISO 13485, il est conforme à la norme ISO 28620 sur les dispositifs de perfusion portables non électriques
- **SMARTeZ[®] RS chimio** dispose des études de stabilité pour un nombre important de médicaments dont le 5-FU pour les cytotoxiques

Sûr

- Connexion/déconnexion **ChemoSafe[®]**, connecteur Luer Lock mâle clos. Tous les professionnels de santé sont à l'abri des risques liés à l'usage des cytotoxiques, même au domicile du patient
- Coque rigide pour répondre aux attentes des professionnels de santé

Précis

- Nouvelle membrane en caoutchouc de silicone pour des débits plus linéaires et un volume de fin de perfusion maîtrisé
- Tubulure TPU, débit de perfusion sans réduction pour cause de plicature de tubulure
- Tubulure distale de débit de précision micro-alésée (exclusivité), sans capillaire de restriction responsable de ralentissement ou d'arrêt de perfusion par précipitation du 5-FU. Précision $\pm 10\%$

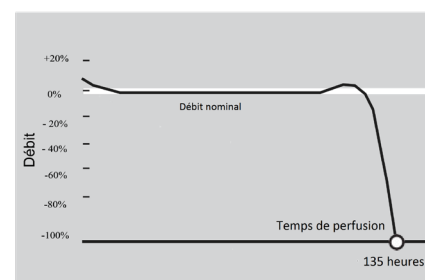

Pratique

- Proposé en série avec un cordon « tour de cou »
- Dispositif livré avec tous ses composants pré-montés



Gamme SMARTeZ[®] RS Chimio (catalogue complet sur demande)

Références	Volume nominal	Durée	Débit / code couleur	Remplissage volume min.	Remplissage volume max.	Boîte
478010HC	48 ml	24 h	2 ml/h	24 ml	48 ml	10
478040HC	100 ml	50 h	2 ml/h	50 ml	100 ml	
478070HC	120 ml	24 h	5 ml/h	60 ml	120 ml	
478080HC	120 ml	30 h	4 ml/h	60 ml	120 ml	
478130HC	250 ml	48 h	5,2 ml/h	125 ml	250 ml	
478140HC	250 ml	5 jours	2,1 ml/h	125 ml	250 ml	
478160HC	270 ml	27 h	10 ml/h	135 ml	270 ml	